



# doctorVet+

therapy laser



## EVERYTHING YOU NEED. EVERYTHING YOU WANT.

3  
Touche  
Sélection  
Protocole

Connexion  
Wi-Fi

4  
Tête  
Interchangeable

7" Ecran  
Couleur  
Tactile

Onde  
continue et  
25,000 Hz  
635 808 915nm  
520nm  
(Faisceau Laser)

Puissance  
de pic 16 W

Fibre  
flexible de 2  
mètres

Batterie  
Puissante  
Rechargeable



## MODALITÉ DE TRAITEMENT COMPLÈTEMENT INTÉGRÉ.

L'introduction de **doctorVet Plus** apporte la thérapie au laser de classe IV dans une nouvelle direction. Les protocoles sont perfectionnés, les traitements sont améliorés et l'interface utilisateur est personnalisable. La plus grande différence est l'accent mis sur le flux de travail, la connectivité et les dossiers médicaux DICOM. **doctorVet Plus** a révolutionné l'expérience de gestion des cas des opérateurs et des propriétaires d'animaux. Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour traiter efficacement les animaux et communiquer efficacement avec leurs propriétaires se trouvent dans le nouveau laser de thérapie **doctorVet Plus**.


# PLAT-FORME MODULAIRE, EXTENSIBLE, SÉLECTIONNABLE.

doctorVet Plus est EWP – Expandable Workflow Platform (Plate-forme de workflow extensible)

Lambda/doctorVet sait que les besoins de la pratique sont différents dans le monde. La plate-forme de workflow extensible (EWP) permet aux cabinets de personnaliser doctorVet Plus pour répondre à leurs besoins. Les pratiques peuvent comprendre :

- Traitements simples pour les patients
- Base de données clients et patients avec historique du traitement
- Rapports personnalisés de traitement des patients envoyés aux propriétaires d'animaux
- Connectivité à MWL (Modality Worklist) à partir du logiciel de gestion du cabinet
- Connectivité au PACS pour un dossier de traitement organisé du patient

La conception de doctorVet Plus avec une plate-forme de flux de travail extensible démontre que les pratiques nécessitent une personnalisation complète pour répondre à leurs besoins cliniques, de gestion et de communication avec les clients.

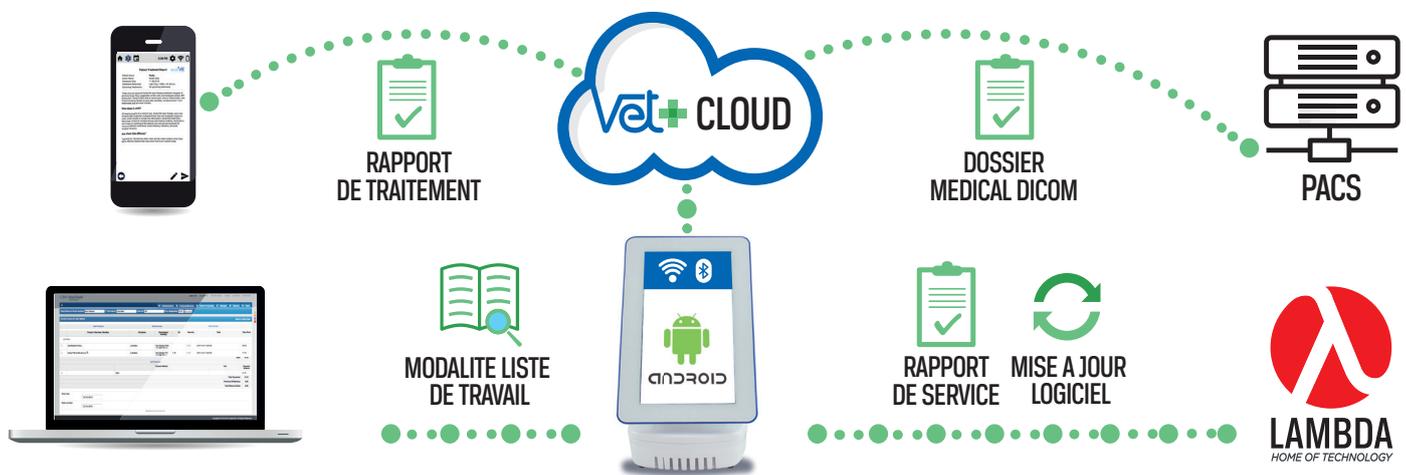


## CONNECTIVITÉ & WORKFLOW INTEGRATION

doctorVet Plus intègre une connectivité offrant des fonctionnalités et des avantages uniques à la thérapie au laser. Le WiFi et le Bluetooth intégrés offrent :

Caractéristiques	Avantages
Mises à jour logicielles automatiques	Fonctions logiciel à jour (comme pour votre smartphone)
Rapports personnalisés de traitement des patients	Amélioration des communications avec les clients et de la conformité
DICOM connexion au PACS	Amélioration des archives dossiers et rapport médical légal
Modalité liste de travail (MWL) du logiciel de gestion cabinet	Améliore le flux de travail

Chaque fonctionnalité peut être personnalisée pour des pratiques individuelles.



# DOSIMÉTRIE ET DÉVELOPPEMENT DE PROTOCOLES POUR DES SOINS OPTIMAUX.

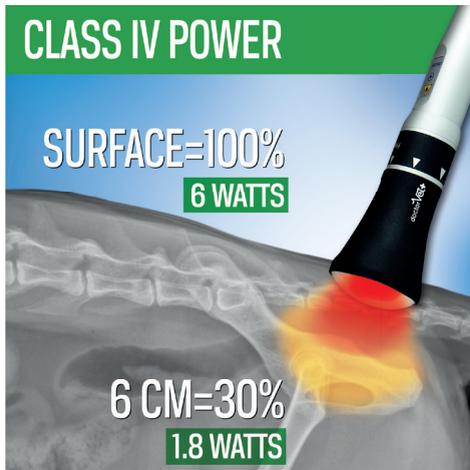


Les soins optimaux aux patients résultent par l'intégration de la puissance, des pulsations et de la science de la dosimétrie. S'il est vrai que l'onde continue (CW) fournit le plus grand dosage d'énergie dans un temps plus rapide, des études prouvent que des impulsions variables fournissent également une stimulation améliorée à des tissus spécifiques.

Il est également démontré que les impulsions supérieures à 10.000 Hz fournissent des effets antibactériens et antimicrobiens accrus. En combinant une puissance de crête de 16 W et des capacités d'impulsion de 25.000 Hz avec le support de protocoles scientifique, **doctorVet Plus** garantit systématiquement l'efficacité du traitement.


## LONGUEURS D'ONDE STIMULÉES.

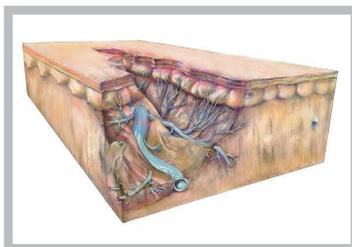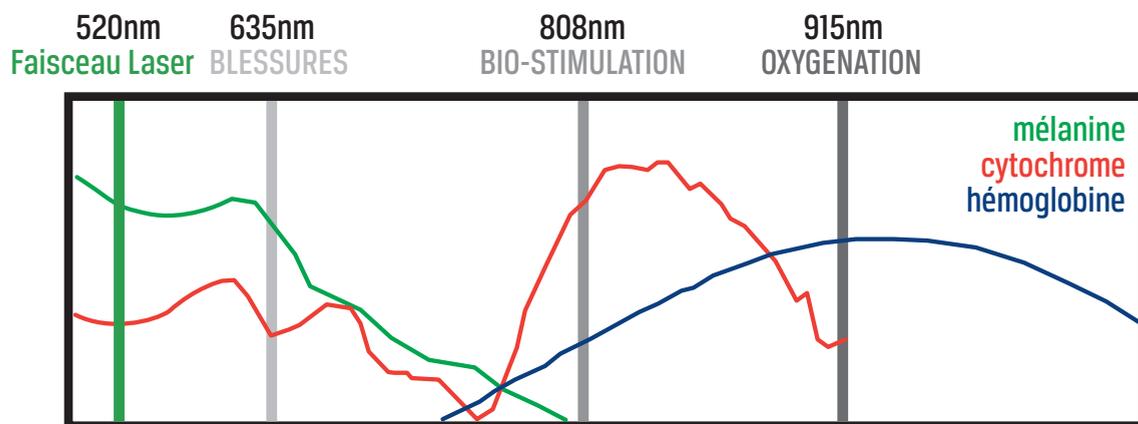

BLESSURES

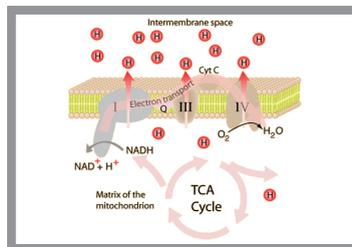

BIO-STIMULATION

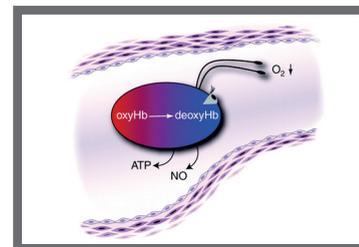

OXYGENATION

Les longueurs d'onde infrarouges sont idéales pour la biostimulation. Il n'existe aucune étude identifiant la supériorité d'une longueur d'onde sur d'autres. En combinant les longueurs d'onde 635 nm, 808 nm et 915 nm ( $\pm$  10%), **doctorVet Plus** assure une pénétration et une stimulation optimales des tissus ciblés sans chauffer les tissus de surface. Cela permet à **doctorVet Plus** de répondre aux besoins de traitement généraux de la pratique vétérinaire.

# PLUS QU'UNE THÉRAPIE LASER

- WiFi pour mise à jour logiciel, Communication Client, MWL et PACS Intégrés
- Rapport traitement patients
- doctorVet Metrics (DVM)
- Planification des traitements
- Rappels des traitements
- Rappels DICOM Médical
- Enregistrement PACS Intégré
- Données sur Cloud
- Modalité liste de travail intégré
- PDT (Thérapie Photo-Dynamique)



Gestion de la Douleur



Blessure



Biostimulation



Acupuncture



Conditions Orales



Dermatologie

## TOBI ARRIVE QUAND VOUS L'APPELEZ.

Une formation appropriée est essentielle à une utilisation clinique efficace. Mais il est difficile de préparer une infirmière à traiter toutes sortes de conditions présentes. **doctorVet Plus** enseigne en temps réel avec des instructions expliquées étape par étape. Notre équipe d'experts associée à notre expérience de plus de 20 ans en thérapie vétérinaire laser, permettent d'obtenir d'excellents résultats cliniques. Dans chaque phase du traitement, des conseils spécialisés sont affichés pour guider le praticien à travers une technique de traitement qui offrent une efficacité thérapeutique maximale.

**TOBI (Treatment On Board Instructions)** est un tutoriel qui vous guide à travers chaque phase du protocole pour garantir le succès de tous vos traitements **doctorVet Plus**. La touche «i» présente sur l'écran fournit des conseils supplémentaires pour une efficacité et une exécution optimales des traitements effectués.



# 20 ANS D'EXPÉRIENCE

## doctorVet Plus



80% des patients qui franchissent votre porte pourraient bénéficier des traitements doctorVet Plus. doctorVet Plus fournit une solution avec les toutes dernières technologies et à un coût très abordable.

doctorVet Plus y parvient en incorporant des fonctionnalités dont les avantages sont scientifiquement prouvés et en omettant les fonctionnalités coûteuses que d'autres entreprises tentent de vous convaincre que vous en avez besoin. Concentrez-vous sur ce que dit la science ; La puissance, l'impulsion et la dosimétrie sont les seuls paramètres prouvés.

Caractéristiques	doctorVet Plus	doctorVet V2
Puissance de Pic	16 Watts	16 Watts
Longueur d'onde & Puissance	635 nm 500 mW 810 nm 8 W 915 nm 8 W	635 nm 500 mW 810 nm 8 W 915 nm 8 W
Ecran Couleur Tactile	●	●
Batterie Puissante Rechargeable	●	●
5 Phases de Protocoles Traitement	Canine, Féline, Équine, Petit Mammifère, Volatile, Exotique	Canine, Féline, Équine, Petit Mammifère, Volatile, Exotique
TOBI	Multimedia	Multimedia
Tête Zoom	Incluse	Incluse
Tête Massager TX	Incluse	Incluse
Tête Spotter TX	Optionnelle	Optionnelle
Tête Sweeper TX	Optionnelle	Optionnelle
Analyse Metrics	●	●
WiFi	●	●
Mise à jour Logiciel	WiFi (automatique)	WiFi (automatique)
PDT (Thérapie Photo-Dynamique)	●	●
Base de donnée Patient	●	
Planification Traitements	●	
Communication Client	●	
Connectivé PACS/MWL	●	



Certified Quality System



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 13485:2015



### LAMBDA SPA

Via dell'Impresa, 1  
36040 BRENDOLO (VI) Italy  
T +39 0444.349165  
F +39 0444.349954  
info@lambdaspa.com  
lambdaspa.com